

"Kakadu" toilet- og badestol i aluminium


OY1. Toilet- og badestolen er som standard udstyret med 4 stk. låsbare 5" hjul



OY2. Toilet- og badestolen monteret med 24" hjul

Toilet- og badestolen "Kakadu" er fremstillet i pulverlakeret aluminium og bliver som standard leveret med 4 stk. 5" låsbare hjul. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød sort PUR for god siddekomfort. Benstøtterne er højdejusterbare og kan let afmonteres. Leveres komplet med toiletspand og låg.

Montering af 24" hjul som tilbehør (dog ikke for varenr. 302015). Det er muligt på enkel vis at udskifte de 2 bageste 5" hjul med 24" hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremser, findes i tilbehørssættet (varenr. 302017).

Tekniske data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Forskel med 24"
Sæddebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sæddedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sædehøjde	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Sæde åbning	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Frihøjde **	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---	---	---
Fribredde	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---	---	---
Totalbredde	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 5 cm
Totalhøjde	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	130 Kg	130 Kg	---
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Kipvinkel (tilt)	---	---	---	---	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

* Forøget total breddeforskel for Kakadu tilt (302024 eller 302025): +14 cm.

** Hjul med forlænget rør (varenr. 30212M) giver mulighed for +5 cm ekstra frihøjde.

"Kakadu tilt" toilet- og badestol i aluminium med tiltfunktion



OY3. "Kakadu Tilt" Bad- og toiletstol vinkel indstillelig



OY4. Bad- og toiletstol "Kakadu Tilt" i vinklet tilstand

Toilet- og badestolen "Kakadu" med tilt kan vinkles fra -5° til $+25^{\circ}$. Hovedstøtten med udkæring til ørerne kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel. Fodstøtterne kan indstilles i såvel vinklen som i højden. Som standard leveres badestolen med 5" låsbare hjul, hvor det også er muligt på enkel vis at udskifte de 2 bagerste 5" hjul med 24" hjul.

Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt sort PUR som sikrer en god komfort.

Tilbehør til toilet- og badestolene

Til toilet- og badestolene i "Kakadu" serien kan blandt andet leveres følgende tilbehør. For det samlede tilbehørsprogram henvises til prislisterne.



OY5. Amputationsstøtte




OY6. Sikkerhedsbøjle



OY7. Antitip (kun til version med 24" hjul)



OY8. Sæde med rundt hul

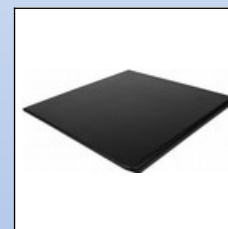


OY9. Sædeafdækning for sæde med rundt hul

NYHED "Commode Liner" hygiejneposer

Den nye patenterede **Commode Liner Disc** er et unikt, bærbart og fleksibelt tilbehør til de fleste toiletstole, som er let og hygiejnisk at bruge og mindsker infektionsrisikoen.

Liner Disc bruges i forbindelse med **Commode Liner poser** (sælges separat) og kan let anbringes på og fjernes fra sædet for at forhindre forurening af sædet og spanden.

Disse hygiejneposer fås med plastplade (billede OY10) eller uden (billede OY11).

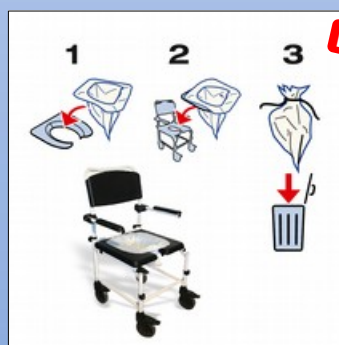

OY10. Commode Liner Disc



OY11. Commode Liner